



Manual de usuário



ÍNDICE

1. Descrição do produto	1
Para que serve Liip Conteúdo da caixa Visão geral do produto	
2. Instruções de uso	3
Instalação e primeiro uso Como colocar Liip Smart Monitor corretamente Instruções de lavagem	
3. Instruções de segurança importantes	5
Avisos Condições de uso Precauções para uso de bateria Instruções sobre reciclagem e descarte de baterias Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos Conformidade com RoHS	
4. Garantias e termos legais	6
Recursos Como obter o serviço de garantia Exclusões e limitações Garantias implícitas Limitação de danos Lei aplicável Direitos legais nacionais Serviço de atenção ao cliente	

1. Descrição do produto



Para que serve Liip

Liip Smart Monitor oferece tranqüilidade no cuidado e bem-estar do seu bebê, transmitindo informações sobre o seu estado. Através da tecnologia mais inovadora, Liip detecta os principais sinais vitais do bebê, informa sobre as mudanças que podem ser um problema e informa as diretrizes para a ação.

Liip Smart Monitor é um novo conceito de monitor para bebês que traz o conhecimento que você precisa para saber como seu bebê está se saindo.



Conteúdo da caixa

- 1 Núcleo Liip Smart Monitor
- 1 Manual de usuário
- 1 Botão de desligamento e reinicialização
- 4 Pulseiras intercambiáveis
- 1 Carregador
- 1 Cabo USB

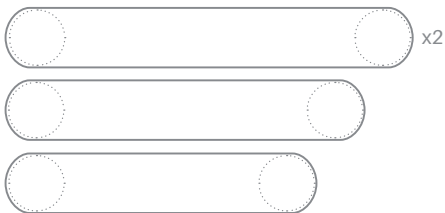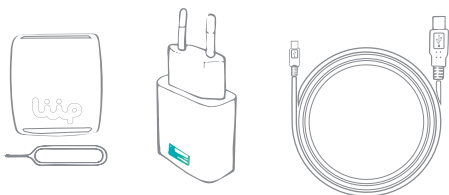

Visão geral do produto

1. Luz indicadora (LED)
2. Botão de reinicialização
3. Lingueta de segurança
4. Conector USB para carregamento de bateria
5. Sensor de pulso e saturação de oxigênio
6. Pino
7. Sensor de temperatura

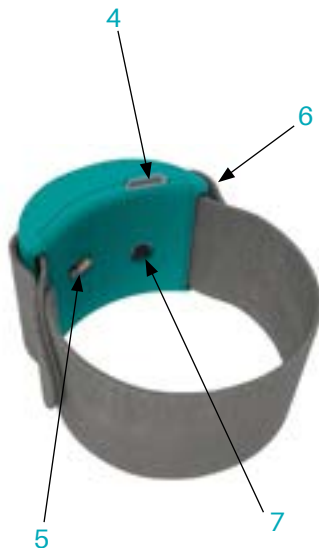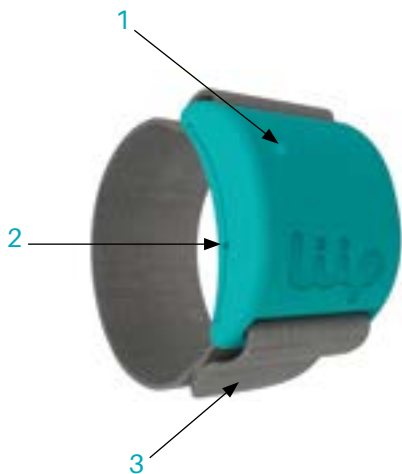


2. Instruções de uso

Você encontrará mais informações sobre o uso do Liip Smart Monitor no Guia Didático que preparamos para você na nossa web www.liip.care.


Instalação e primeiro uso

A

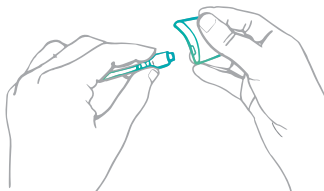


Carregue a bateria do Liip Smart Monitor por 1 hora até que a luz do led fique verde.

B

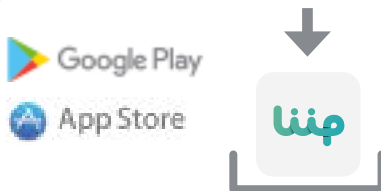

Baixe o aplicativo de Liip em seu smartphone em sua loja de aplicativos.

C

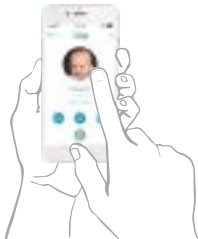

Inicie o aplicativo e siga as instruções para criar sua conta de usuário e vincular seu celular ao seu Liip Smart Monitor.

D




Para ligar o Liip Smart Monitor ao seu smartphone, você deve digitar o código de conexão. Este código é composto de 6 números e está localizado na parte inferior da caixa.

Como colocar Liip Smart Monitor corretamente

Liip Smart Monitor deve ser usado preferencialmente na perna esquerda. O núcleo deve ficar voltado para a frente, com o USB voltado para cima e o logotipo da Liip voltado para cima.

Deve ser segurado com firmeza, para que não gire em torno da perna do bebê ao exercer a menor pressão.

De 10 a 12 meses, o Liip Smart Monitor também pode ser usado no pulso. Neste caso, a maneira correta de colocá-lo é no braço esquerdo, com o USB voltado para a mão e o logotipo da Liip olhando para dentro.

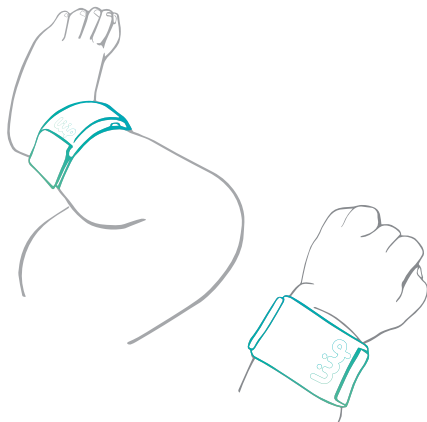

Instruções de lavagem

Os materiais utilizados no Liip Smart Monitor são hipoalergênicos e facilmente laváveis para facilitar a manutenção de uma higiene adequada. O núcleo e as pulseiras devem ser lavados separadamente.

As pulseiras devem ser lavadas à mão com água fria. Não use água sanitária. Não use secadora. Recomenda-se que cole o velcro à pulseira para evitar que ela adira a outros tecidos.

O núcleo deve ser lavado com um pano seco, tomando um cuidado especial para manter os sensores livres de sujeira para o funcionamento adequado dos mesmos.



3. Instruções de segurança importantes

Avisos

Liip Smart Monitor foi cuidadosamente concebido para cumprir os regulamentos em vigor na União Europeia, evitando o risco de afogamento por pequenas peças ou por longos cabos, bem como danos causados por arestas vivas ou pontos afiados.

Liip Smart Monitor deve ser usado sob a supervisão de um adulto.

Liip Smart Monitor não é um produto higiênico e não deve ser usado para fins diagnósticos, terapêuticos ou de prevenção de doenças em países onde as leis não o permitem

Condições de uso e segurança

1. Leia as instruções.
2. Mantenha as instruções.
3. Respeite todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este dispositivo perto de água.
6. Não coloque o dispositivo próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos que geram calor.
7. Use este produto somente sob a supervisão de um adulto.
8. Use somente o carregador e o cabo vendido com o dispositivo ou certificados de acordo com a norma EN 60950-1.
9. Quaisquer reparos devem ser feitos por pessoal de serviço qualificado. O aparelho deve ser reparado quando estiver danificado de alguma forma, por exemplo: quando o cabo de alimentação ou ficha estiver danificado, quando derramar líquido quando o aparelho for exposto à chuva ou humidade, quando o aparelho não funcionar normalmente ou depois de uma queda.
10. Não exponha este aparelho a salpicos ou pingos e certifique-se de que não há objetos como líquidos, como óculos, sobre o aparelho.
11. Para desconectar completamente o aparelho da rede elétrica, desconecte o plugue do cabo de alimentação do receptáculo AC.
12. O plugue de alimentação do cabo de alimentação deve permanecer pronto para ser usado novamente.
13. Não exponha as baterias a calor excessivo, como sol, fogo ou situação semelhante.
14. Não tente abrir, desmontar ou consertar o dispositivo por conta própria.
15. Não deixe cair, não o jogue fora ou tente dobrá-lo.

Precauções para uso de bateria

1. Não tente abrir a bateria.
2. Não perfure, desmonte ou cause curto-circuito na bateria.
3. Não jogue no fogo ou no lixo, não o exponha a temperaturas acima de 60 °C.
4. Não use a bateria para outros usos para os quais ela foi projetada.
5. Não use baterias danificadas ou não recomendadas pela Wearables Intelligent, S.L.

Instruções sobre reciclagem e descarte de baterias

A nova Diretiva 2006/66 / EC sobre baterias e acumuladores que substitui a anterior Diretiva entrou em vigor em 26 de setembro de 2008. A Diretiva aplica-se a todos os tipos de baterias e acumuladores (AA, AAA, baterias de botão, chumbo ácido, recarregável), incluindo aqueles que são incorporados em aparelhos elétricos, exceto para aplicações militares, médicas e de ferramentas elétricas. A Diretiva estabelece normas para coleta, tratamento, reciclagem e descarte de baterias, e objetiva proibir certas substâncias perigosas e melhorar o desempenho ambiental das baterias e de todos os operadores da cadeia de suprimento.

A bateria do seu dispositivo não é removível e não é possível ao usuário removê-lo. Os centros de reciclagem ou recuperação são aqueles que gerenciam o desmantelamento do produto e a extração da bateria. Se, por qualquer motivo, for necessário substituir a bateria, o procedimento deve ser realizado em centros de serviço autorizados. Na União Europeia e em outros lugares, é proibido descartar baterias junto com o lixo doméstico. Todas as baterias devem ser descartadas de maneira que não seja prejudicial ao meio ambiente. Entre em contato com funcionários locais de gerenciamento de resíduos para obter informações sobre coleta, reciclagem e descarte ambientalmente seguros de baterias usadas.

Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos

A Diretiva 2012/19 / EU sobre WEEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos), resultou em uma mudança fundamental no tratamento de equipamentos elétricos que estão no final de sua vida útil. O objetivo desta diretiva é, como primeira prioridade, a recuperação dos referidos resíduos, a fim de reduzir a eliminação. O logotipo WEEE está no produto e na caixa e indica a coleção de equipamentos elétricos e eletrônicos. O logotipo de WEEE é composto pela lixeira de rodas com um traço cruzado, conforme mostrado abaixo. Este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos.



Você tem a responsabilidade de remover todos os resíduos de seu equipamento eletrônico ou eletrônico e, para esse fim, deve levá-los ao ponto de coleta especificado para a reciclagem dos referidos resíduos perigosos. A coleta isolada e a recuperação adequada dos resíduos de seus equipamentos elétricos e eletrônicos no momento do descarte nos permitem ajudar a conservar os recursos naturais. Da mesma forma, a reciclagem adequada de resíduos de seus equipamentos elétricos e eletrônicos garantirá a segurança da saúde humana e do meio ambiente. Para obter mais informações sobre descarte, recuperação e pontos de coleta de resíduos para equipamentos elétricos e eletrônicos, entre em contato com o centro da cidade local, o serviço de descarte de lixo doméstico, a loja onde comprou o equipamento ou o fabricante do equipamento.

Conformidade com RoHS

Por meio deste documento, a Wearables Inteligentes SL declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011 sobre a restrição ao uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ondas eletromagnéticas

Por meio deste documento, a Wearables Inteligentes SI declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 no que se refere à harmonização de legislação dos Estados-Membros sobre a comercialização de equipamento de rádio, incluindo as orientações sobre a exposição a ondas eletromagnéticas, de acordo com as normas EN 301.489-1 e EN 301.489-17, e as diretivas relativas à radiofrequência, de acordo com a EN 300.328.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de ondas de rádio é projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretivas internacionais. As diretivas foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma importante margem de segurança para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade ou estado de saúde. Seguindo esses critérios, a norma estabelece que a potência irradiada legal máxima para este dispositivo é de 20mW. Os resultados dos testes realizados são os seguintes:

Mode	Frequency (MHz)	Max. Output power (dBm)	Max. Antenna gain (dBi)	Max.E.I.R.P (dBm)	Max.E.I.R.P (mW)
Bluetooth	2402	4,0	+0,6	4,6	2,88
	2440	4,0	+0,6	4,6	2,88
	2480	4,0	+0,6	4,6	2,88

A potência máxima irradiada pelo dispositivo é de 2,88mW, portanto, atende aos requisitos legais.

4. Garantias e termos legais

Wearables Inteligentes S.L. ("Liip") garante ao comprador original que seu dispositivo eletrônico Liip Smart Monitor (o "Produto") estará livre de defeitos de materiais e de fabricação com uso normal por um período de um (1) ano * a partir de a partir da data de aquisição, a menos que o comprador resida no Espaço Econômico Europeu (EEE) e tenha comprado seu produto Liip no EEE, onde o período de garantia é de dois (2) anos * a partir da data de aquisição (o "Período de Garantia"). A Liip não garante que a operação do Produto seja ininterrupta ou que esteja livre de falhas. A Liip não será responsável pelos danos decorrentes da falha em seguir as instruções em relação ao uso do Produto. Esta Garantia Limitada não cobre o software incorporado no produto e os serviços prestados pela Liip aos proprietários do produto. O contrato de licença que acompanha o software e os termos dos serviços da Liip são usados para obter detalhes sobre seus direitos com relação ao seu uso.

Recursos

Se for detectado um defeito de hardware e Liip receber uma reclamação válida dentro do Período de Garantia, a seu exclusivo critério e de acordo com as disposições da lei, Liip (1) consertará o Produto sem encargos, usando peças de reposição novas ou reparadas ou (2) mudará o Produto para um Produto novo ou reparado. Em caso de defeito, de acordo com o estipulado por lei, estes são seus únicos recursos possíveis. Os custos de envio podem ser aplicados exceto onde proibido pela lei aplicável. Esta Garantia Limitada é válida somente nas jurisdições em que os produtos são comercializados por Liip ou por meio de seus distribuidores ou agentes autorizados e é válida na extensão permitida pelas leis aplicáveis a essas jurisdições. Todos os produtos de hardware de substituição serão garantidos durante o restante período de garantia original ou por trinta (30) dias, o que for mais longo, ou durante qualquer período adicional aplicável em sua jurisdição.

Como obter o serviço de garantia

Para usufruir do serviço de garantia, você deve entregar o Produto, com os custos de transporte pagos e em sua embalagem original ou em um pacote que forneça o mesmo grau de proteção no endereço especificado pela Liip. De acordo com as leis aplicáveis, Liip pode solicitar que você forneça uma prova de compra, que você atende a determinados requisitos de registro ou ambos antes de usufruir do serviço de garantia.

* A vida útil da bateria do produto em termos de vida útil dependerá das condições de uso e da configuração do dispositivo. Como as baterias são consideradas consumíveis, as especificações indicam que você obterá o melhor desempenho para o seu produto durante os primeiros seis (6) meses após a compra e aproximadamente para mais 200 recargas.

Exclusões e limitações

Esta garantia limitada aplica-se apenas ao produto fabricado pela ou para Liip e podem ser identificados pela marca "Liip" a marca ou logotipo apresentado. A Garantia Limitada não se aplica a (a) produtos e serviços da Liip além do Produto, (b) produtos de hardware que não sejam da Liip, (c) consumíveis (como baterias) ou (d) software, mesmo se incluídos no pacote ou será vendido com o Produto ou integrado no Produto. Esta garantia a qualquer produto ou parte produto que tenha sido alterado ou modificado (por exemplo, para alterar as funções ou capacidades) por alguém que não seja representante Liip ou não se aplica se o Produto é inserido ou instalado em uma caixa não fornecida pela Liip. Além disso, esta garantia limitada não se aplica nos seguintes casos: (a) danos causados pela utilização com produtos não-Liip, (b) danos causados por acidente, mau uso, mau uso, inundação, incêndio, terremoto ou outras causas, (c) danos externo causado pelo uso do produto fora das utilizações permitidas ou indicado descrito por Liip ou em conjunto com uma fonte de tensão ou alimentação adequada, ou (d) os danos causados por manutenção (incluindo atualizações e extensões) feitos por qualquer pessoa que não seja o representante da Liip. A recuperação e reinstalação de programas de software e dados do usuário não são cobertas por esta garantia limitada. Nenhum distribuidor, agente ou funcionário da Liip está autorizado a realizar qualquer modificação, extensão ou adição nesta Garantia Limitada. Se qualquer termo é declarado ilegal ou não aplicável, a legalidade ou aplicabilidade dos termos restantes permanecerão válidas e não serão afetados.

Garantias implícitas

EXCEPTO NA MEDIDA DO PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS (INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM) ESTÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA. Algumas jurisdições não permitem limitações na duração de uma garantia implícita, portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você.

Limitação de danos

EXCEPTO NA MEDIDA EM QUE AS LEIS APLICÁVEIS PROIBEM, A LIIP NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À, PERDA DE BENEFÍCIOS, RECEITAS OU DADOS EM RESULTADO DE QUALQUER VIOLAÇÃO DAS CONDIÇÕES, OU GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, OU EM CONFORMIDADE COM QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL, MESMO QUE O LIIP TENHA SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, incidentais ou consequenciais, portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você.

Lei aplicável

Esta Garantia Limitada será regida pelas leis da Espanha e da União Europeia, sem qualquer efeito de conflito de leis que possa permitir a aplicação da legislação de outra jurisdição.

Direitos legais nacionais

Os consumidores residentes em algumas jurisdições podem ter direitos legais abrangidos pela legislação nacional aplicável à venda de bens para consumo, incluindo, entre outros, as leis nacionais que transpõem a Diretiva 99/44 / CE. Esses direitos não serão afetados pelas garantias estabelecidas nesta Garantia Limitada.

Serviço de atenção ao cliente

Para qualquer reclamação sobre a aplicação da garantia legal do seu produto, de acordo com as disposições do Real Decreto Legislativo 1/2007, pode contactar-nos através do nosso endereço de email liip@liip.care ou por correio normal:

Wearables Inteligentes, S.L.
Avenida Benjamin Franklin 12:22
46980 Paterna
Espanha

Versão do documento

Data: 14/05/2018
Número da versão: 5



